

 **ALC/CONTROL**

**EINFACH.  
SICHER.  
TÜV-GEPRÜFT.**



[www.testme.de](http://www.testme.de)

**EINFACH.  
SICHER.  
TÜV-GEPRÜFT.**





# ALC/c CONTROL



## START

Erst ca. 20 Minuten nach dem letzten Alkoholverzehr. Unmittelbar vor der Anwendung nicht rauchen, nicht essen!



*Use approximately 20 minutes after your last alcoholic drink. No smoking or eating immediately before use!*



## PRESS

Kappen auf beiden Seiten zur Mitte drücken. (siehe Markierung)

*Press lids on both ends of the device simultaneously towards the centre. (see labelling)*



2 x  
10 sec.

## BLOW

Tief Luft holen! Ca. 10 Sekunden (ohne viel Druck) in das Mundstück pusten. Vorgang wiederholen!

*Take a deep breath! Blow into the mouth piece for approximately 10 seconds (not much pressure needed). Repeat!*



**ACHTUNG:** Tritt die ausgeatmete Luft nicht auf der anderen Seite aus oder erhitzen sich die Kristalle nicht, den Test wiederholen!



**CAUTION:** If exhaled air does not escape on the other end of the device or the crystals do not heat up, repeat the test!



## READ

Testergebnis nach wenigen Sekunden an der Skala ablesen!

*Your test result will show on the scale after a few seconds!*



**ACHTUNG:** Haben sich die weißen Kristalle verfärbt, so steht die Testperson unter Alkoholeinfluss und sollte nicht mehr selbst fahren.



**CAUTION:** If the white crystals are discoloured, the user is under the influence of alcohol and should not drive.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Der Alkoholtester sollte

- nur einmal verwendet werden.
- bei min -25°C bis max +40°C gelagert werden.
- von Kindern ferngehalten werden.
- sicher und trocken aufbewahrt werden.
- nur gemäß der Bestimmungen gebraucht werden (Einzelteile können gesundheitsschädlich sein).
- bei Bruch (Glas!) nicht verwendet werden (Schnittgefahr!).

### HAFTUNGSFRAGEN:

Das Testergebnis

- kann nur als Orientierung für den Benutzer verwendet werden.
- ist kein rechtlicher Nachweis.

Die Testperson ist für ihre Handlungen und Entscheidungen nach dem Alkoholtest selbst verantwortlich. Diese liegen nicht in der Verantwortung des Herstellers oder Händlers des Alkoholtesters.

Nach Gebrauch in der gelben Tonne entsorgen.

Mehr Informationen: [www.testme.de](http://www.testme.de)

### SAFETY WARNINGS:

The breathalyser should be

- used once only.
- stored at min -25°C to max +40°C.
- kept out of the reach of children.
- stored safely and kept dry.
- used only according to instructions (individual components can be damaging to your health).
- discarded unused if broken (danger of cuts from glass!).

### LIABILITY QUESTIONS:

The test result

- can only be used as guidance by the user.
- is no legal evidence.

The user is solely responsible for actions or decisions after using the breathalyser. The manufacturer or merchant of the breathalyser are not liable.

After use, discard in the yellow bin.

More informations: [www.testme.de](http://www.testme.de)

EINFACH. SICHER. TÜV-GEPRÜFT.



Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 0000055702



# INFOBLATT DRUCKDATEN

## FLYER 110x300 MM (MIT LASCHE), VORDERSEITE

Druckdaten in Originalgröße anlegen (Maßstab 1:1)

Gestaltbare Fläche: Vorderseite (Hier schwarz dargestellt)

Breite: 110 mm

Höhe: 300 mm

Beschnitt: 3 mm (umlaufend)

Farbmodus: CMYK

PDF-Standard: PDF/X-3:2002

Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)  
› in PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent (Ausgabebedingung) anzulegen.

Endformat: 115 x 300 mm

Beschnitt: 3 mm (umlaufend)


Sicherheitsabstand: 5 mm (Abstand von Texten und Objekten zum Rand)

Auflösung: mindestens 300 dpi

Schriften: einbetten/in Pfade umwandeln

**⚠ Bitte verwenden Sie für die Datenanlage unsere Druckvorlage. Die Ebene „Stanze“, sowie die Sonderfarbe „CutKontur“ dürfen nicht verändert werden.**

- Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz (CMYK: 0|0|0|100) anlegen.
- Keine zusätzlichen Sonder- und Schmuckfarben sowie keine alternativen Farbräume anlegen.
- Vermeiden Sie in Ihrer Datei Druckmarken, wie z. B. Falz-, Schneide-, Stanz- oder Passermarken, da diese sonst mitgedruckt werden.
- Einschränkungen und Sicherheitseinstellungen des PDFs müssen deaktiviert sein (kein Passwortschutz).
- Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop oder Affinity Photo erstellt wurden, lassen Sie uns bitte als TIF- oder JPG-Datei zukommen.
- Für Druckdaten aus Bildbearbeitungsprogrammen gilt grundsätzlich:
  - auf Hintergrundebene reduzieren
  - keine Alpha-Kanäle
  - keine Freistellungspfade/Beschneidungspfade
  - TIF-Dateien ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved
  - JPG-Dateien mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

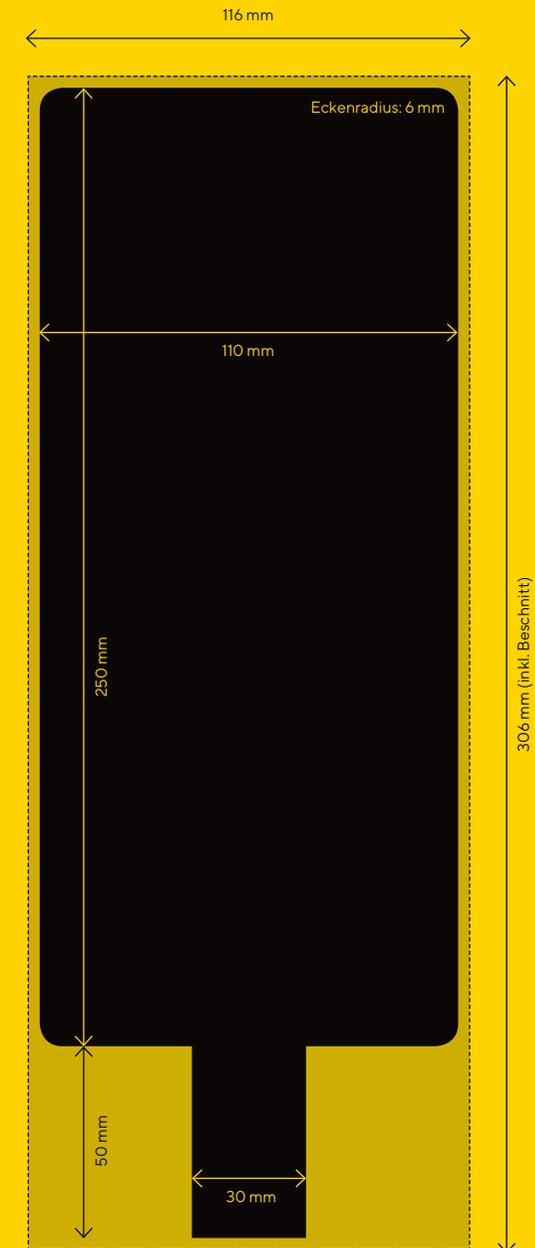

# INFOBLATT DRUCKDATEN

## BANDEROLE 40 x 90 MM, SICHTBEREICH 35 x 10 MM

Druckdaten in Originalgröße anlegen (Maßstab 1:1)

Sichtbereich Logo: 35 x 10 mm

Breite: 40 mm

Höhe: 90 mm

Beschnitt: 3 mm (umlaufend)

Farbmodus: CMYK

PDF-Standard: PDF/X-4:2010


Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)  
› in PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent (Ausgabebedingung) anzulegen.

Endformat: 40 x 90 mm

Beschnitt: 3 mm (umlaufend)

Auflösung: mindestens 300 dpi

Schriften: einbetten/in Pfade umwandeln

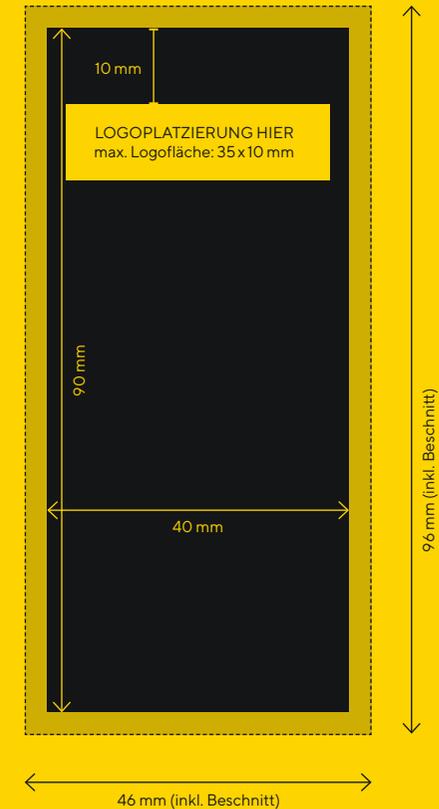

- Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz (CMYK: 0|0|0|100) anlegen.
- Keine Sonder- und Schmuckfarben sowie keine alternativen Farbräume anlegen.
- Druck-PDF inklusive Schnittmarken ausgeben.
- Einschränkungen und Sicherheitseinstellungen des PDFs müssen deaktiviert sein (kein Passwortschutz).
- Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop oder Affinity Photo erstellt wurden, lassen Sie uns bitte als TIF- oder JPG-Datei zukommen.
- Für Druckdaten aus Bildbearbeitungsprogrammen gilt grundsätzlich:
  - auf Hintergrundebene reduzieren
  - keine Alpha-Kanäle
  - keine Freistellungspfade/Beschneidungspfade
  - TIF-Dateien ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved
  - JPG-Dateien mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

# INFOBLATT DRUCKDATEN

## AUFKLEBER RUND, DURCHMESSER 30 MM

Druckdaten in Originalgröße anlegen (Maßstab 1:1)

Breite: 30 mm

Höhe: 30 mm

Beschnitt: 3,5 mm (umlaufend)

Farbmodus: CMYK

PDF-Standard: PDF/X-3:2002

Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)  
› in PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent (Ausgabebedingung) anzulegen.


Endformat: Durchmesser 30 mm

Beschnitt: 3,5 mm (umlaufend)

Sicherheitsabstand: 2 mm (Abstand von Texten und Objekten zum Rand)

Auflösung: mindestens 300 dpi

Schriften: einbetten/in Pfade umwandeln

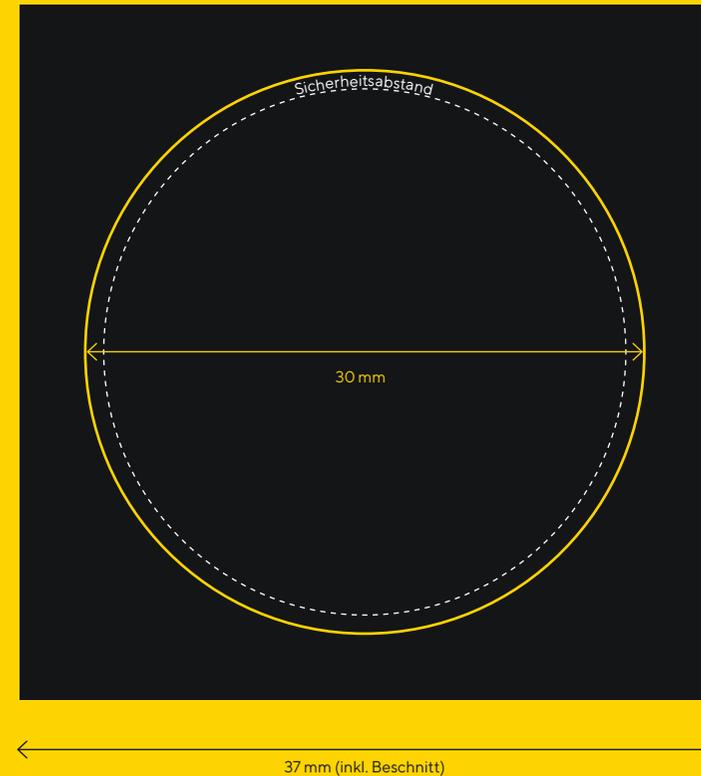

- Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz (CMYK: 0|0|0|100) anlegen.
- Keine Sonder- und Schmuckfarben sowie keine alternativen Farbräume anlegen.
- Vermeiden Sie in Ihrer Datei Druckmarken, wie z. B. Falz-, Schneide-, Stanz- oder Passermarken, da diese sonst mitgedruckt werden.
- Einschränkungen und Sicherheitseinstellungen des PDFs müssen deaktiviert sein (kein Passwortschutz).

- Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop oder Affinity Photo erstellt wurden, lassen Sie uns bitte als TIF- oder JPG-Datei zukommen.
- Für Druckdaten aus Bildbearbeitungsprogrammen gilt grundsätzlich:
  - auf Hintergrundebene reduzieren
  - keine Alpha-Kanäle
  - keine Freistellungspfade/Beschneidungspfade
  - TIF-Dateien ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved
  - JPG-Dateien mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern